

ANPHOTEROL®
SOLUCIÓN EFICAZ PARA DETENER EL AVANCE DE QUEMADURAS QUÍMICAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



contacto@tplusindustrial.cl / www.tplusindustrial.cl

FICHA TÉCNICA

ANPHOTEROL® DCM

Descontaminador nebulizado personal con solución ANPHOTEROL® cutáneo y ocular.

SKU: DCM100, DCM 200

SOLO UTILIZAR EN CASO DE QUEMADURA QUÍMICA

DESCRIPCIÓN:

Es un dispositivo médico clase II, que consiste en un sistema de lavado de primeros auxilios con solución Anphoterol® en formato aerosol y acción nebulizada, indicados para piel y ojos, en caso de accidentes por salpicaduras con agentes químicos de pH ácido y alcalino. **Presentado en dos formatos de 100 mL y 200 mL con solución Anphoterol®.**

BENEFICIOS

- Solución biodegradable desarrollada con componentes presentes en el cuerpo humano.
- No produce daño o traumas en la zona ocular o cutánea.
- Presentación ligera y fácil de manipular.
- Spray nebulizado.

CARACTERÍSTICAS

SKU	Peso Neto	Peso Bruto	Dimensiones	Gas Propulsor	Vencimiento	Uso	Tiempo de Lavado
DCM100	100 mL 104 g de Solución Anphoterol®	100 mL 0,17Kg	Ø53mm H:180mm	Aire comprimido	24 meses	Cutánea y ocular	120 s.
DCM200	200 mL 208 g de Solución Anphoterol®	200 mL 0,27 Kg	Ø53mm H: 210 mm				240 s.



DCM 200
SPRAY TIPO NIEBLA 200mL
(Tapa Verde)

DCM 100
SPRAY TIPO NIEBLA 100mL
(Tapa Blanca)

MODO DE USO

Solo se debe girar y presionar la tapa del dispositivo, y la solución Anphoterol®, saldrá expulsada como spray nebulizado. Aplique directamente en la superficie afectada a una distancia de 10 a 15 cm, vaciando **TODO** el contenido del envase.
(Ver protocolo de Uso)

- DCM100 indicado para áreas afectadas hasta 3%.
- DCM200 indicado para áreas afectadas hasta 9%.

ALMACENAMIENTO

Mantener producto a temperatura superior a 2°C y menor a 25°C.

CERTIFICACIONES

- Conforme ISP DDM/2027/19
- ISO 13485



FICHA TÉCNICA

ANPHOTEROL® DMT

Descontaminador nebulizado personal con solución ANPHOTEROL® cutáneo y ocular.

SKU: DMT2L, DMT5L

SOLO UTILIZAR EN CASO DE QUEMADURA QUÍMICA

DESCRIPCIÓN:

Es un dispositivo médico clase II, que consiste en un sistema de lavado de primeros auxilios de solución Anphoterol® portátil y de fácil aplicación con acción nebulizadora, indicados para piel y ojos, en caso de accidentes por salpicaduras con agentes químicos de pH ácido y alcalino. **Presentado en dos formatos de 2 Litros y 5 Litros de solución Anphoterol®.**

BENEFICIOS

- Solución Biodegradable desarrollada con componentes presentes en el cuerpo humano.
- No produce daño o traumas en la zona ocular o cutánea.
- Transportable de un área de trabajo a otro.
- Rociado Nebulizado.
- Accesorios incluidos para instalación en muro.
- Manguera de 1,2m de largo para fácil maniobrabilidad.
- Material acero inoxidable.



DMT2L
DESCONTAMINADOR
(Versión Pequeño)

DMT5L
DESCONTAMINADOR
(Versión Grande)

MODO DE USO

Tirar el pin de seguridad para romper precinto, accionar la manilla y lavar de inmediato. Aplique directamente en la superficie afectada a una distancia entre 10-15 cm, vaciando **TODO** el contenido del envase. **Producto Unidosis.** (Ver protocolo de Uso)

- DMT2L indicado para áreas afectadas que abarquen una extensión 9-36% SCT.
- DMT5L indicado para áreas afectadas que abarquen una extensión 37-100% SCT.

ALMACENAMIENTO

Mantener producto a temperatura superior a 2°C y menor a 50°C. Se recomienda la adquisición conjuntamente de ACC2, para garantizar mejor cuidado y protección en ambientes agresivos y si serán instalados a la intemperie. Se recomienda la adquisición conjuntamente de ST3, en el caso de trabajar con temperaturas extremas.

CERTIFICACIONES

- Conforme ISP DDM/2027/19
- ISO 13485

CARACTERÍSTICAS

SKU	Peso Neto	Peso Neto	Dimensiones	Gas Propulsor	Vencimiento	Uso	Tiempo de Lavado
DMT2L	2L 2,1 Kg de Solución Anphoterol®	4,3 Kg	W: 15 cm L: 15 cm H: 45 cm	14kg/cm² Nitrógeno	24 meses	Brazo/ Pierna, Torso	-4 min.
DMT5L	5,2 Kg de Solución Anphoterol®	8,2Kg	W: 18 cm L: 18 cm H: 55 cm				-8 min.



FICHA TÉCNICA

ESTUCHE TÁCTICO LIGERO

Estuche táctico para DCM

SKU: ST1

DESCRIPCIÓN:


Estuche táctico ligero de tamaño universal para portar los dispositivos **DCM100** y **DCM200**. Su uso permite disminuir el tiempo de reacción en el uso de los dispositivos DCM y garantiza el correcto transporte y mantenibilidad de la solución Anphoterol® alojado en su interior.

BENEFICIOS

- Producto versátil, duradero y ligero.
- Permite ser utilizado para los DCM en ambas presentaciones.
- Impermeable al agua.
- Es fácil y cómodo transportarlo.
- Fácil de abrir ante una emergencia química.
- Puede utilizarse en conjunto con el **CT1**, permitiendo mantenerlo cerca durante las jornadas laborales.

CARACTERÍSTICAS

SKU	Categoría	Peso	Dimensiones	Material	Color
ST1	Accesorios DCM	58 g.	H: 210mm Ø: 70mm	Nylon 1000 Denier Cordura	Negro con logo blanco

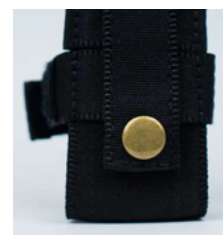

COMPONENTES:

- Cuerdas elásticas y correas de velcro expandible para adaptarse a los DCM.
- Tiene el logo en color blanco.

CONDICIONES DE USO:

- Lavado exclusivamente a mano en agua fría o tibia.
- La vida útil dependerá del uso y del cuidado que se brinde.



FICHA TÉCNICA

ESTUCHE TÁCTICO CERRADO

Estuche táctico cerrado porta DCM

SKU: ST4-100 / ST4-200

DESCRIPCIÓN:

Estuche táctico ligero cerrado de tamaño único para **DCM 200** y **SDCM 100**. Permite proteger el dispositivo médico ante ambientes agresivos y donde la cantidad de partículas en el aire sea moderada o alta. Garantiza el correcto transporte y mantenibilidad de la solución Anphoterol® alojada en su interior.

BENEFICIOS

- Producto versátil, duradero y ligero.
- Impermeable al agua.
- Es fácil y cómodo transportarlo.
- Fácil de abrir ante una emergencia química.
- Puede utilizarse en conjunto con el **CT1**, permitiendo mantenerlo cerca durante las jornadas laborales.



COMPONENTES:

- Pretina
- Cinta velcro 3.8
- PVC negro doble tela (rigidez)
- Tapa con PU y Oxford
- Huincha color negro
- Tirador cinta con velcro
- Media luna metálica (agarre)

CONDICIONES DE USO:

- Lavado exclusivamente a mano en agua fría o tibia.
- La vida útil dependerá del uso y del cuidado que se brinde.

CARACTERÍSTICAS

SKU	Categoría	Peso	Dimensiones	Material	Color
ST4-100	Accesorios DCM	82 g.	H:220 mm W: 80 mm L: 90 mm	Cinta Velcro y Oxford	Verde y negro
ST4-200		84 g.	H:240 mm W: 80 mm L: 90 mm		



FICHA TÉCNICA

CINTURÓN TÁCTICO LIGERO

Cinturón táctico con cinta reflectante

SKU: CT1

DESCRIPCIÓN:

Cinturón táctico diseñado para utilizarlos como complemento de un sistema de protección personal ante una emergencia química, su objetivo es sujetar estuches ligeros o isotérmicos DCM (ST1 y ST2) los cuales permiten portar los dispositivos médicos DCM100 o DCM200 en terreno.

BENEFICIOS

- Producto Chileno. Adaptable al cuerpo del usuario.
- Fácil acceso a los dispositivos médicos ante una emergencia química durante la jornada laboral. Sirve para sujetar portarradios o cualquier otro accesorio tipo molle.



COMPONENTES:

- Cinturón fabricado en 100% polyester.
- Broche plástico de liberación rápida de 5cm de ancho.
- Velcro en el lado interior para ajustar la longitud del cinturón.
- Cinta de 2,5 cm ancho para alta visibilidad

CONDICIONES DE USO:

- Lavado exclusivamente a mano en agua fría o tibia.
- La vida útil dependerá del uso y del cuidado que se brinde.

CARACTERÍSTICAS

SKU	Categoría	Peso	Dimensiones	Material	Color
CT1	Accesorios DCM	200 g.	L: 130cm H: 5cm	Polyester, plástico y velcro	Negro



FICHA TÉCNICA

BASE MURAL ACRILICA DCM

Base en acrílico para fijación a muro

SKU: ACC1

DESCRIPCIÓN:

Base de acrílico con capacidad para 2 o 3 DCM, puede ser utilizado con DCM100 o DCM200, o incluso combinarlo, esto de acuerdo con su preferencia. La función es que todos los trabajadores sometidos a riesgos químicos conozcan su ubicación de forma de tener una respuesta inmediata ante una emergencia. Su diseño facilita su identificación y que puedan acceder en el menor tiempo posible.

BENEFICIOS

- Su material es de larga duración y resistente a derrames químicos.
- Permite almacenar dos unidades de DCM de su preferencia.
- Fácil instalación.
- Rápida identificación.
- Puede almacenar de dos a tres dispositivos.



COMPONENTES:

- Cuenta con 4 perforaciones en la parte superior para fijación del muro.
 - Cuenta con logo de identificación de Anphoterol®.
 - Puede solicitar la compra de dos o tres unidades de DCM.
- Es compatible con los ST2.

CONDICIONES DE USO:

- Lavado exclusivamente a mano, con un paño húmedo a temperatura ambiente.
- La vida útil dependerá del uso y del cuidado que se brinde.

CARACTERÍSTICAS

SKU	Categoría	Peso	Dimensiones	Material	Color
ACC1	Accesorios DCM	300 g	H: 30 cm W: 14 cm L: 8 cm	Acrílico de 4mm	Transparente
ACC1-1		500 g	H: 30 cm W: 21 cm L: 8 cm		



FICHA TÉCNICA

GABINETE PORTÁTIL DCM

Gabinete portátil eco-cuero para DCM

SKU: ACC3

DESCRIPCIÓN:

Gabinete portátil para instalación a muro, colgar en muro y transporte manual, diseñado para el correcto almacenamiento de nuestros dispositivos médicos DCM. Capacidad de entre 2 y 3 unidades de DCM.

BENEFICIOS

- Resistencia a golpes.
- Soporte peso de hasta 20 Kg.
- Fácil instalación.
- Permite el correcto almacenamiento de los DCM.



COMPONENTES:

- Cierre magnético superior.
- 1 Correa fija para transporte manual.
- Posee dos agujeros en su parte posterior para instalación fija a muro.
- Gancho en la parte superior para instalación semi-fija a muro.
- Base intercambiable para dos o tres unidades.

CONDICIONES DE USO:

- Limpieza exclusivamente a mano, con un paño húmedo a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS

SKU	Categoría	Peso	Dimensiones	Material	Color
ACC3	Accesorios DCM	500 g.	W: 8cm L: 26cm H: 21 cm	Eco-cuero Poliuretano	Verde



FICHA TÉCNICA

GABINETE PLÁSTICO DMT

Gabinete Plástico para Descontaminador Nebulizado Portátil (DMT)

SKU: ACC2

DESCRIPCIÓN:

Gabinete diseñado para almacenar y proteger nuestros dispositivos médicos DMT, resistiendo a la inclemencia del tiempo, y ambientes corrosivos. Su diseño aumenta la visibilidad ante una situación de emergencia química, pudiendo tener una reacción inmediata y disminuir los tiempos de exposición. También es bastante seguro al poseer dos correas de seguridad que permiten mantener el DMT en su lugar, y la puerta posee cierre con trabas de presión y pin de seguridad.

BENEFICIOS

- Permite un correcto almacenamiento de los DMT.
- Resistente a bajas y altas temperaturas.
- Resistente al óxido y la corrosión.
- Fácil instalación, sin perforaciones.
- Resiste hasta 10 Kg. **Soporta DMT2L y DMT5L**



COMPONENTES:

- Sistema de cierre doble cangrejo.
- Correa ajustable con broche para sujeción de dispositivo DMT.
- Posee dos agujeros en su parte posterior para instalación fija a muro.
- Puerta abatible con dos mirillas, que permiten rápida inspección.

CONDICIONES DE USO:

- Limpieza exclusivamente a mano, con un paño húmedo a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS

SKU	Categoría	Dimensiones	Embalaje	Material	Color
ACC2	Accesorios DMT	Largo: 670 mm Ancho: 280 mm Alto: 230 mm Peso: 3,0 Kg	Largo: 680 mm Ancho: 300 mm Alto: 240 mm Peso: 3,5 Kg	Polycarbonato	Negro y Verde



FICHA TÉCNICA

MALETIN DE EMERGENCIA QUÍMICO-TÉRMICO

Maletín de emergencia

SKU: KIT1



DESCRIPCIÓN:

Kit de primeros auxilios para quemaduras químicas y térmicas. Este Kit completo reúne elementos para atender los primeros auxilios de accidentes químicos y por temperatura; es un práctico maletín anti-impacto, impermeable y con cinta blanca reflectante alrededor. En su interior trae un compartimiento mallado con cierre de velcro, que permiten una previa distribución de los elementos según el tipo de emergencia que se requiera asistir.

BENEFICIOS

- Refuerzo interno acolchado anti-impacto para proteger el contenido ante posibles caídas del maletín.
- Maletín recubierto con PVC transparente fácil de limpiar.
- Cremallera posterior, que puede utilizarse para guardar documentos
- Cinta reflectante para visualización inmediata.
- Fácil traslado ante una emergencia.

COMPONENTES:

Quemaduras químicas:

- 3x Anphoterol® DCM100
- 1x Anphoterol® DCM200

Tratamiento de quemaduras térmicas:

- 3x apósitos hidrogelados para quemaduras 10x10cm.
- 1x apósito hidrogelado para quemaduras 20x20cm.
- 1x apósito hidrogelado para quemaduras 30x40cm
- Rostro.
- 15x sachet hidrogel 3,5 gr.
- 1x espray hidrogel 120 ml.

Kit básico- primeros auxilios:

- 1x tijera de extricación punta de pato 15 cm
- 2x vendas de gasa elasticada 8cm x 4mts.
- 5x vendas adhesivas
- 1x Par de guantes de nitrilo para procedimientos.
- 1x maletín de emergencias y documentación.

CONDICIONES DE USO:

- La vida útil dependerá del uso y del cuidado que se brinde.
- Algunos de los componentes poseen fecha de caducidad, ver marcaje de cada producto.

CARACTERÍSTICAS

SKU	Categoría	Peso	Dimensiones	Material	Color
KIT1	Accesorios DCM	3,3 Kg	L: 35 cm H: 27 cm W: 10 cm	Cuerpo: PVC Correa: Nylon	Negro



FICHA TÉCNICA

BLUE DOT ANTÍDOTO HF

Solo usar en caso de quemadura con HF

SKU: GEL HF

DESCRIPCIÓN:

Es un dispositivo médico clase III, que consiste en un gel antídoto de uso tópico de gluconato de calcio 2,5%, utilizado como primeros auxilios en quemaduras químicas ocasionadas por el ácido fluorhídrico (HF).

BENEFICIOS

- Reduce el riesgo de Hipocalcemia.
- Tamaño compacto, lo que permita ser almacenado en botiquines de primeros auxilios.
- Alivia el dolor y es fácil de aplicar.
- Se puede aplicar inmediatamente tan pronto como se sospeche de la quemadura.
- No es necesario ningún equipo sofisticado.



MODO DE USO:

- Aplicar Anphoterol® de 200 mL en la zona afectada, retirar cuidadosamente la ropa contaminada para no extender la zona de contacto entre el agente y la piel. Utilizando guantes protectores adecuados, aplique el antídoto H-F abundante en el área afectada, masajeando suavemente usando repetidas aplicaciones hasta 15 min después de que el dolor haya disminuido. Cubra el área afecta con un apósito bañado en gel y una venda ligera. Si el dolor reincide en el área quemada reaplique el gel antídoto H-F. Transferir al paciente al hospital.

ALMACENAMIENTO:

- Mantener producto a temperatura superior a 8°C y menor a 30°C.

CONTRA-INDICACIONES:

- En caso de salpicadura en los ojos, NO aplicar Gel.

CERTIFICACIONES:

- ISO 13.485:2016
- Directiva 93/42/EEC

CARACTERÍSTICAS

SKU	Contenido	Peso Bruto	Dimensiones	Empaque	Descripción Contenido
GEL-HF	25 g.	40 g.	W: 4 cm L: 15 cm H: 4 cm	Tubo de aluminio dentro de una caja.	Gel miscible en agua, incoloro e inoloro

